


Abnahme von humanem Vollblut in STRECK-Röhrchen

Achtung:

1. STRECK Cell-Free DNA BCT Röhrchen bestehen aus Glas!
2. STRECK Cell-Free DNA BCT Röhrchen enthalten Stabilisatoren für die zellfreie-DNA, ein Rückfluss aus den Röhrchen in die Vene sollte daher bei der Blutabnahme unbedingt vermieden werden!
3. STRECK empfiehlt vor der Blutabnahme, die Abnahme eines EDTA-Röhrchens oder eines Röhrchens, welches danach verworfen wird. Bei der Abnahme mehrerer Blutröhrchen, sollte die Abnahme nach dem EDTA- und vor dem Fluorid-Oxalat-Röhrchen erfolgen.

Blutentnahmeanweisung:

1. Blut wird mit einer **Venofix Safety Kanüle G21** abgenommen
2. Der Arm des Patienten muss in einer abwärts gerichteten Position gehalten werden, damit kein Rückfluss entstehen kann
3. Halten Sie das Streck-Röhrchen möglichst aufrecht, damit die chemischen Zusatzstoffe nicht während der Blutabnahme mit dem Verschluss des Röhrchens in Verbindung kommen.
4. Öffnen Sie das Armbindesystem sobald das Blut in das Röhrchen fließt
5. Befüllen Sie das Röhrchen **komplett** mit Blut (10ml)
6. Entfernen Sie das Röhrchen vom Adapter und invertieren Sie es unverzüglich 10 mal. Bei einem unzureichenden oder verspäteten Vermischen des Vollblutes mit den chemischen Zusatzstoffen kann es zu ungenauen Testergebnissen kommen. Eine Inversion umfasst eine Drehung des Handgelenks um 180 Grad hin und zurück.

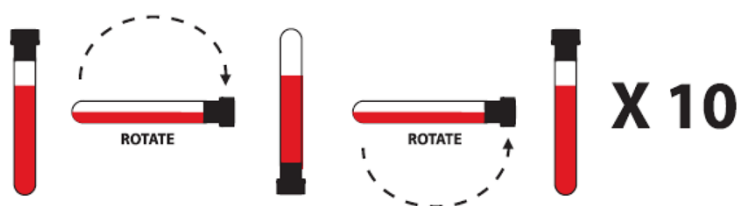

7. Die Streck-Röhrchen **nicht** einfrieren.
8. Die Streck-Röhrchen können **bei Raumtemperatur gelagert und verschickt** werden.
9. Die Streck-Röhrchen gut gesichert verschicken, z.B. in einem Schutzgefäß
10. Die Streck-Röhrchen sollten spätestens an Tag 4 zu Plasma verarbeitet werden. Bitte beim Versand der Proben einberechnen. **➡ Sofortiger Versand ins Labor ⬅**
11. Der Versand soll in einem mit **UN3373** gekennzeichneten Paket erfolgen.

Universitätsklinikum Magdeburg A.ö.R.



Institut für Humangenetik

Prof. Dr. med. M. Zenker

Gültigkeitsbereich: IHG

Revision: 004/05.2026

Seite 2 von 2

Dokumenten-ID: 7296

Status:
freigegeben

Typ:Formulare

Bitte bei Versand der Blutproben beachten:

* Die Streck-Röhrchen so schnell wie möglich verschicken. Die Proben sollten **spätestens 4 Tage** nach Entnahme beim Empfänger ankommen. Sammelkuriere sind ungeeignet.

* Versand in einem mit **UN3373** gekennzeichneten Paket (Bestellnummer siehe unten)

**Sofortiger Versand ins Labor****Bestellnummern der Verbrauchsmaterialien**

Artikel	Firma	Anzahl	Artikel-Nr.
STRECK Röhrchen, Cell Free DNA BCT	HiSS Diagnostics GmbH, Freiburg	6/100	218996/218997
Schutzgefäß mit Deckel und Saugeinlage	Sarstedt AG & Co., Nümbrecht	250	78.573
Blutkultur-Adapter Universal	Sarstedt AG & Co., Nümbrecht	100	141.209
Venofix Safety G21 0,8x19mm	B. Braun Melsungen AG; Melsungen	50	4056504-01
Versandbox	Sarstedt AG & Co., Nümbrecht	50	95.903

Für erste Untersuchungen können Streck-Röhrchen auf Nachfrage bereitgestellt werden.